






全身
X-射线真骨模体

UNIQUE IN
the world

德国 ♥ 制造

点击查看
产品视频

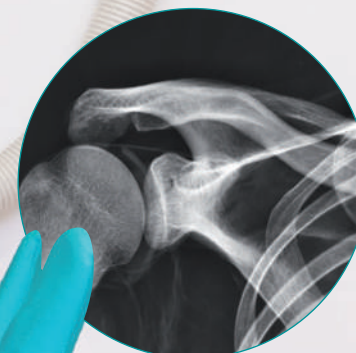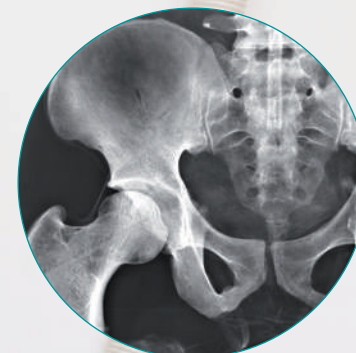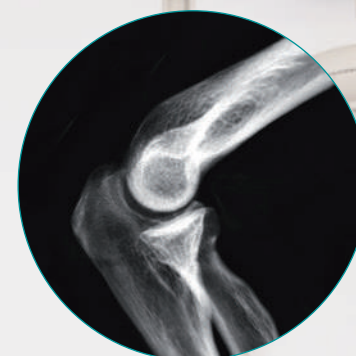



全身X射线模体

该模体全世界独一无二，为投影射线照相中的定位和对准技术提供了绝好的培训方法，它是所有射线照相学校中最基本的设备之一。该模体包含真实的人体骨骼以及喉部、肺部、心脏和肾脏的轮廓（器官会在图像上产生阴影），可以像在真实的患者身上一样拍摄X射线图像。

使用真骨架可以提供即使是最小的引导结构，这对于塑料骨架是不可能的。在组装真骨的过程中，我们特别注意关节间隙的正确尺寸，所有关节都是可移动安装的，可以定位在所有正常的x光位置（如蛙式、前臂前仰和后仰）。

手臂可以向上移动，因此模体适用于CT中各种骨格的检查。每个模体都由手工制作，在尺寸和外观上会有所不同。由于个体的差异，有的可能带一些病理，外部形状也因骨骼的大小而不同。

新版模体是与德国著名的放射技师学校合作重新设计，适合放射教育的所有需求。




局部
骨格模体
也提供



所有EZ的模体
都带运输箱

射线定位模体，塑料骨格

此型号提供7200型号的所有功能，但包含的是塑料骨骼，因此只适合进行定位训练，包括运输和储存箱。

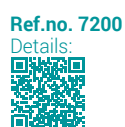

模体破损？我们有4个简单的步骤进行维修：

1. Pick-Up Service

打包发送给工厂



2. Repair Cost Estimate

评估维修成本



3. Repair

快速维修，合理的价格，
维修如新！



4. Delivery


“新”的模体
返给用户。



胸部X射线模体

胸部X射线模体，由脊柱（C6至L3）、胸腔、肩胛骨和锁骨组成，嵌入软材料中，无金属部件安装。器官如肺、心脏、肾脏以轮廓的形式出现，以便在x射线图像上创建阴影。根据可用性的不同，使用的天然骨骼可能会有个别的病理变化、轻微的结构缺陷或安装孔差异。

Ref.no. 7400
Details:

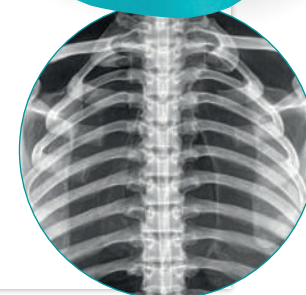

骨盆X射线模体 柔性

骨盆模体包含真实的人体骨骼，提供了独特的拍摄真实x射线图像的场景。由一个完整的骨盆组成，包括尾骨、两个腰椎（L4+L5）和股骨残端。柔软的材料使该产品非常适合触诊。根据可用性的不同，所用的天然骨可能会有个别的病理变化、轻微的结构缺陷或安装孔差异。配有坚固的运输箱。

Ref.no. 7410
Details:



头部X射线模体

为便于使用，我们把头骨安全地嵌入塑料材质中。颞部微微打开，以获得牙齿的全景图像。根据用户订购的类型，颈部可包括颈椎。嵌入的平板可以用三脚架支撑头模来使用。下颌可能有牙缝、牙齿修复、牙齿断裂、牙齿更换或其他的差异特征。有关头模的详细信息，请联系我们。



含颈椎的X射线头模
透明

Ref.no. 7300
Details:



含颈椎的X射线头模
不透明

Ref.no. 7310 Details:



X射线头模
透明

Ref.no. 7320
Details:



X射线头模
不透明

Ref.no. 7330
Details:



X-射线头模三角架

非常坚固的三脚架，用于x射线头模。可折叠但保持稳定，可将头模安全固定到位。带可旋转的头部功能，用于在x射线拍照中精确定位头模

Ref.no. 7350
Details:



所有EZ的模体
都带运输箱



X射线部位模体可重复拍摄单个身体部位的X射线图像，模体包括真正的人类骨骼，可以拍摄真实的X射线图像。这些模体非常适合学校和教育培训，也非常适合医疗技术人员，因为同一块骨头可以在不同的环境中反复进行X光检查，而不会有伤害实际患者的危险。骨骼通常嵌入到透明塑料中，如果有要求，也可以用不透明的颜色覆盖模体，以隐藏内部结构。所有的模体都是手工制作的，独一无二。它们的大小和形状可能会不同。由于生产技术的原因，模体内部可能会出现变色和裂缝，这与生产有关，但不是质量缺陷。

手部X射线模体

带手腕的模体
透明

Ref.no. 7210
Details:



不透明

Ref.no. 7215
Details:



脚部X射线模体

从小腿开始的脚部模体
透明

Ref.no. 7230
Details:



不透明

Ref.no. 7235
Details:



膝盖X射线模体

含部分上小腿和髌骨
透明

Ref.no. 7250
Details:



不透明

Ref.no. 7255
Details:



下臂X射线模体

带前臂和肘部的手骨
透明

Ref.no. 7220
Details:



不透明

Ref.no. 7225
Details:



肘部X射线模体

部分上臂和下臂
透明

Ref.no. 7260
Details:



不透明

Ref.no. 7265
Details:



肩部X射线模体

上肢带骨的肱骨。
透明

Ref.no. 7340
Details:



不透明

Ref.no. 7345
Details:



天然线 CT 模体

由真实的人类患者数据创建，并采用最新技术制造。在120 kVp管电压CT成像下，所有组织的骨骼和软组织都用逼真的Hounsfield单位精确表示。如果主要需要模体在不同的管电压（例如100 kVp）下进行CT成像，则可以根据要求对Hounsfield装置的校准进行相应调整。该模体在X射线成像中也产生逼真的组织对比度。空隙由纤维素聚合物复合材料填充，约80个Hounsfield单位。

头部CTA模体


该模体提供了右侧动静脉畸形患者的头颈部CT血管造影术（具有动脉造影剂增强）的高度逼真的模拟。该模体为原始患者尺寸，包括颈椎，直到第五颈椎的底板。



Ref.no. NLP1000
Details:

手部模体

手部模体提供非常逼真的手部模拟。病理学（如骨折、钙化、骨骼和软组织肿瘤）可根据要求进行整合。

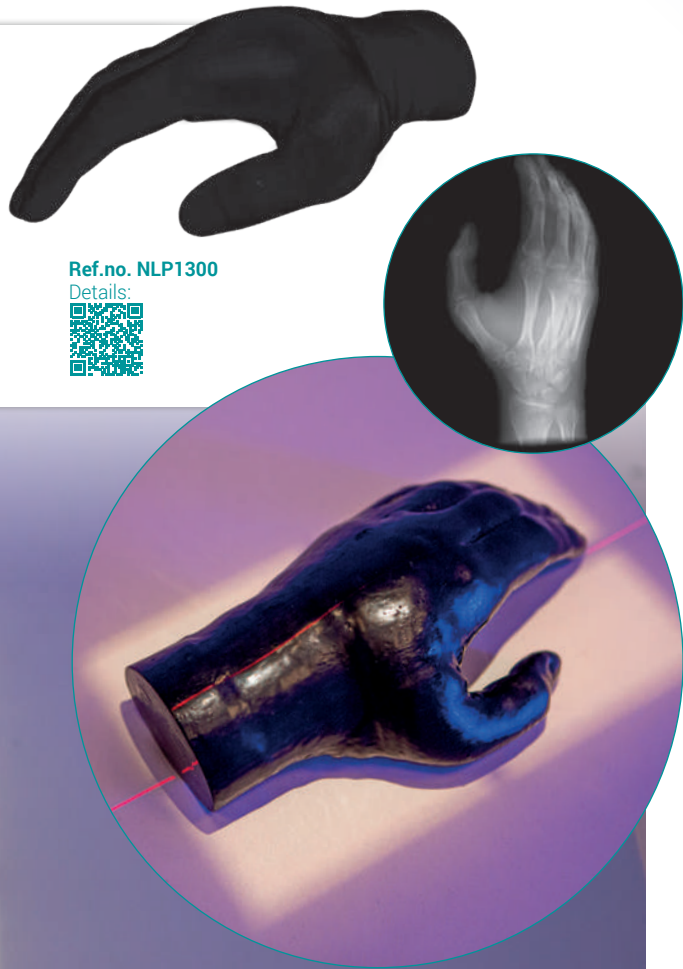


Ref.no. NLP1300
Details:

可定制!

脊椎骨折的儿童腹部模体



该模体对患有平面椎（第一腰椎）的儿童造影剂增强腹部（门静脉期）进行了高度真实的模拟。该模体覆盖了从第十胸椎到第四腰椎底板的腹部，肝脏和两个肾脏也完全包括在内。

Ref.no. NLP1110
Details:

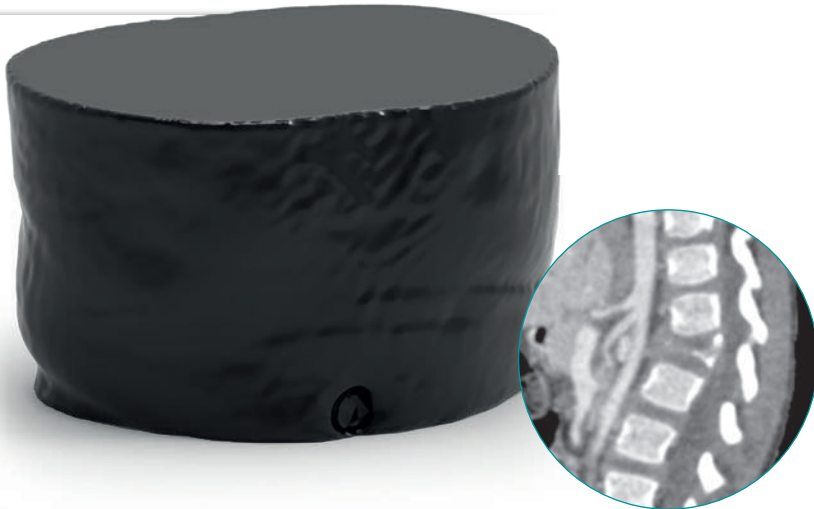


腹部模体

提供了对患者的造影剂增强腹部（动脉晚期）的高度逼真的模拟，该模体覆盖从第十胸椎到第四腰椎的腹部。肝脏和两个肾脏也完全包括在内。

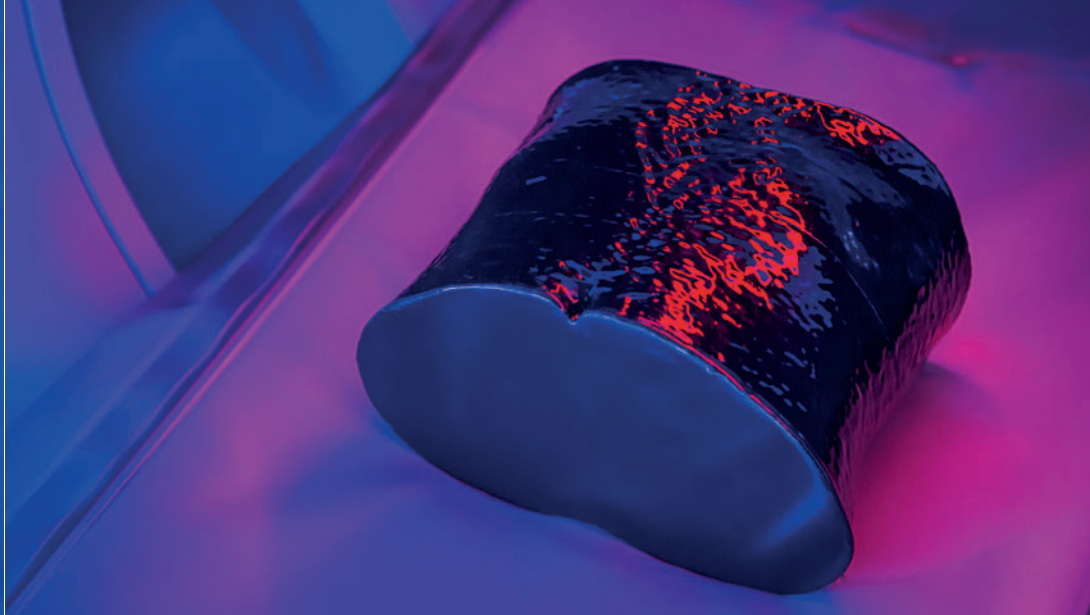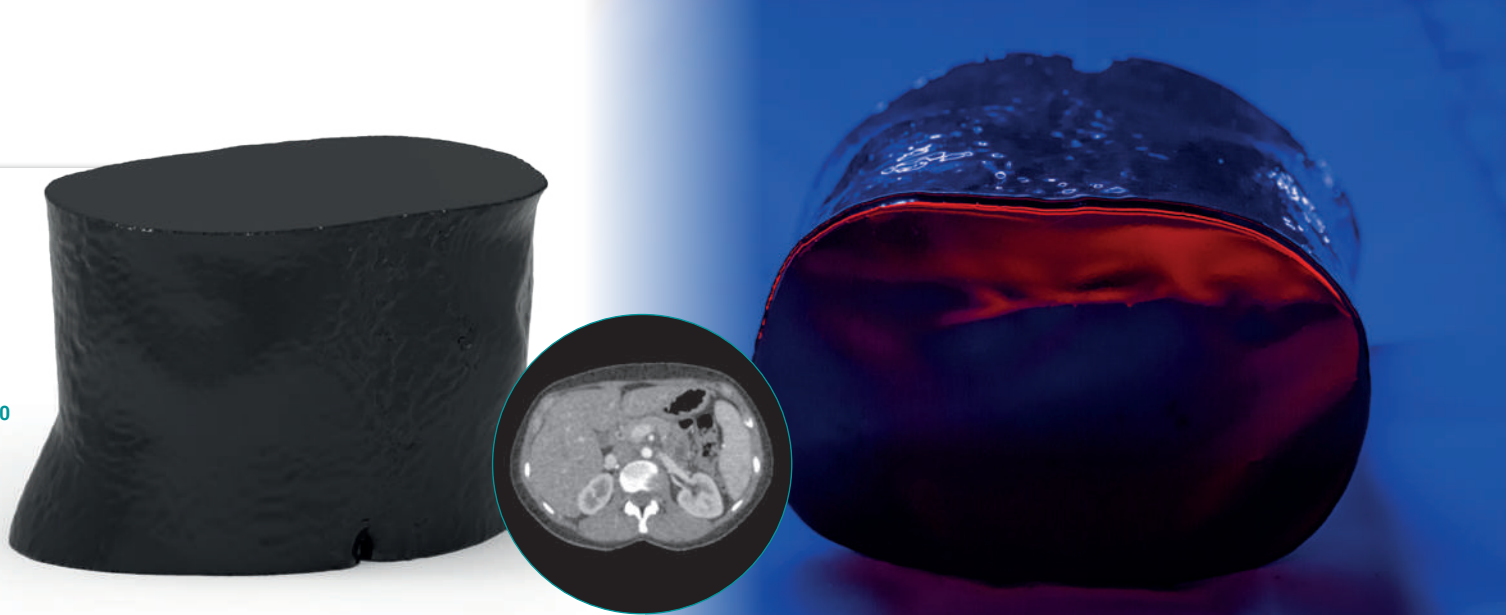


乳腺钼靶和断层合成模体

带有脂肪和腺体组织的乳房模体，这种乳房模体是为了模拟乳房钼靶和乳房断层合成中的乳房成像而设计的。它代表4cm厚的压缩乳房，可以放置在压缩架的下方。模体可提供乳房成像的逼真模拟，它是为测试和优化剂量和图像质量以及培训医疗技术人员而开发的。模体是由包含脂肪和腺组织的虚拟数据制造的。这些模型是手工制作的，在尺寸和设计上可能略有不同。该模体可以作为一体式拟人模体提供或者以截面设计提供。剂量计开口和病理特征可根据要求提供。

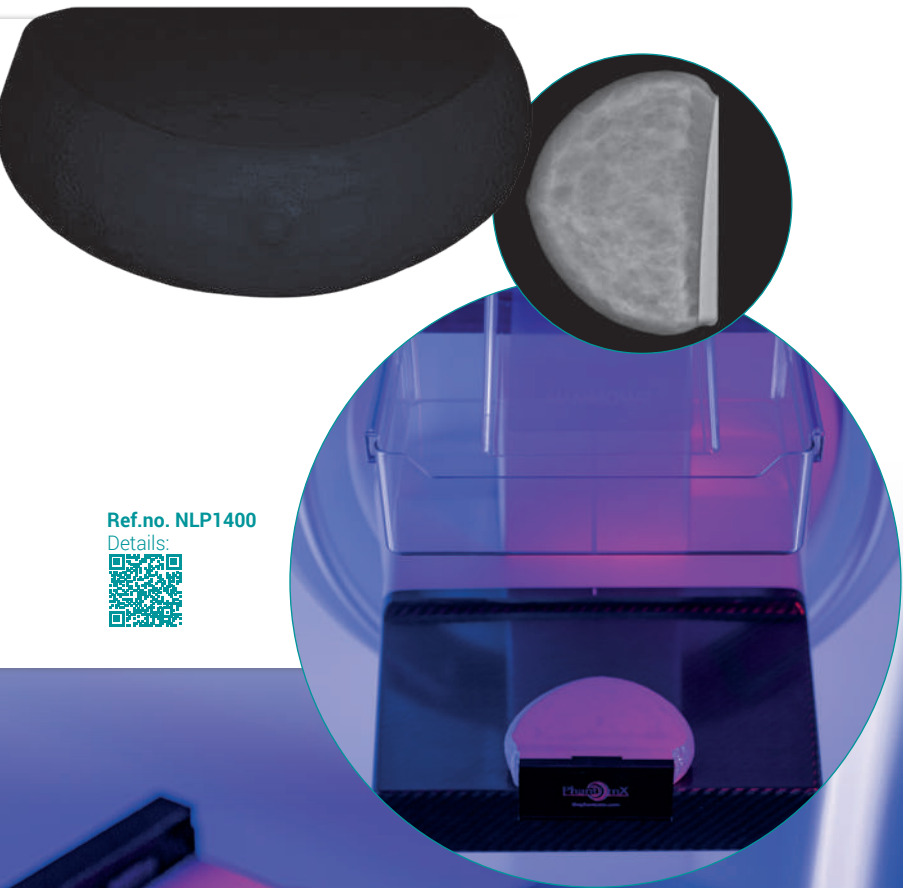


股骨颈骨折的骨盆模体

该模体提供了男性骨盆的真实模拟，没有造影剂增强，左侧股骨颈骨折轻微错位。该模体包括整个骨盆和第五腰椎。

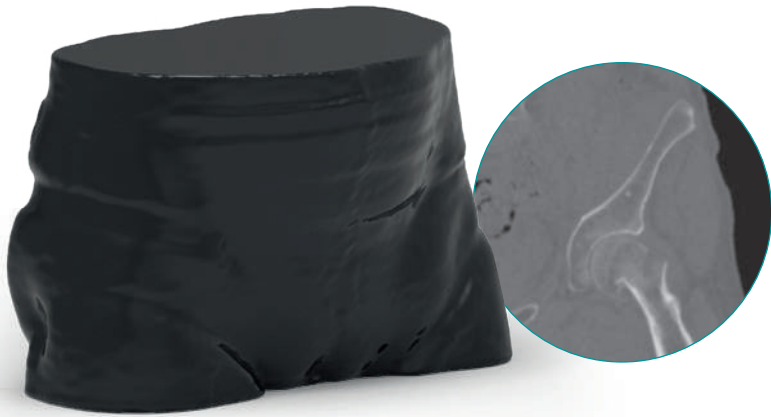

合并关节炎的骨盆模体

该模体提供了女性骨盆的真实模拟，没有造影剂增强，右侧有晚期髋关节骨性关节炎。该模体包括整个骨盆和第五腰椎。

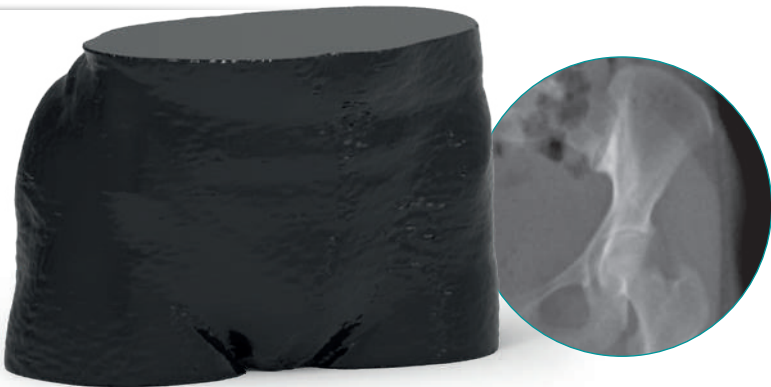

脚部模体

脚部模体提供了一个非常逼真的脚部模拟，病理学（如骨折、钙化、骨骼和软组织肿瘤）可以根据要求进行整合。





CT/X射线 狗模体



该体模提供了一个真实的狗模体，没有造影剂增强。骨骼和软组织在120 kVp管电压CT成像下，以逼真的Hounsfield单位精确表示所有组织。包括肺组织在内的空隙由大约-80个Hounsfield单元的纤维素聚合物复合材料填充。如果在不同的管电压（例如100 kVp）下CT成像主要需要模体，则可以根据要求对Hounsfield单位的校准进行相应调整。模体在X射线成像中也产生真实的组织对比度。

Ref.no. VET14000

Details:



可定制!

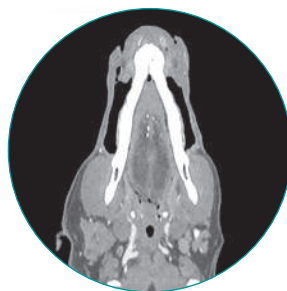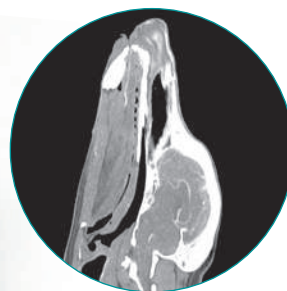

CT/X射线 狗头模体

Ref.no. VET14010




Details:



CT/X射线狗骨盆模体

Ref.no. VET14030

Details:

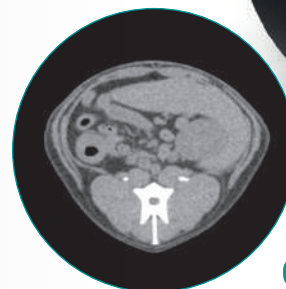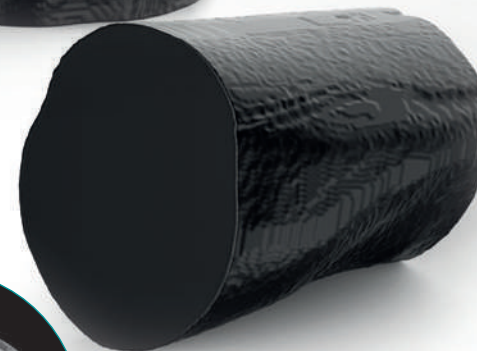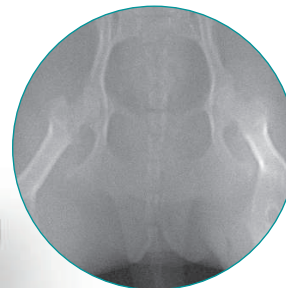

CT/X狗腹部模体

Ref.no. VET14020

Details:



*Experts in medical education
since 1950*

北京华贺技术有限公司

北京市朝阳区裕民路12号

元辰鑫大厦E2313-2315

010-53326395

huhe@testtrend.com

WWW.testtrend.com

Follow us!     


ERLER ZIMMER